

Utilisation du dispositif supraglottique i-gel® - tailles adultes



Préparation



1. Ouvrir l'emballage de l'i-gel® et, sur une surface plane, sortir le support de protection contenant le dispositif.



2. Retirer l'i-gel® en le déposant dans la paume de la main tenant le support de protection et le tenir entre le pouce et l'index.



3. Déposer une noisette de lubrifiant à base d'eau, tel que du gel K-Y Jelly®, au centre de la surface lisse du support de protection en préparation pour la lubrification.



4. Avec la main libre, saisir l'i-gel® par le cale-dents et lubrifier les surfaces frontales, latérales et dorsales du bourrelet avec une fine couche de lubrifiant.




5. Inspecter soigneusement le dispositif pour confirmer l'absence de corps étranger ou de BOLUS de lubrifiant pouvant obstruer l'orifice distal. Replacer l'i-gel® dans son support de protection, en préparation à l'insertion.




Patient	Taille	Poids
Petit adulte	3	30-60kg
Moyen adulte	4	50-90kg
Grand adulte	5	90+kg



Technique d'insertion

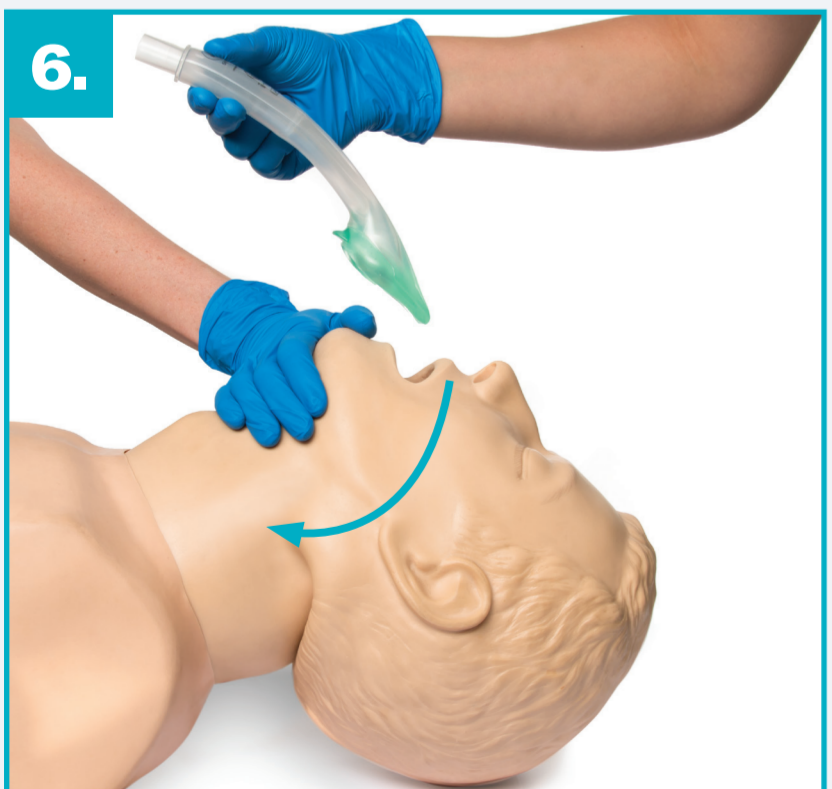


6. Retirer l'i-gel® de son support de protection. Saisir fermement l'i-gel® lubrifié par le cale-dents. Positionner l'i-gel® pour que l'orifice de ventilation du bourrelet soit orienté face au menton du patient. Le patient doit être positionné 'nez en l'air' avec la tête en extension et le cou fléchi. Presser délicatement le menton vers le bas avant de procéder. Introduire l'extrémité avant souple du bourrelet dans la bouche du patient, en direction du palais dur.

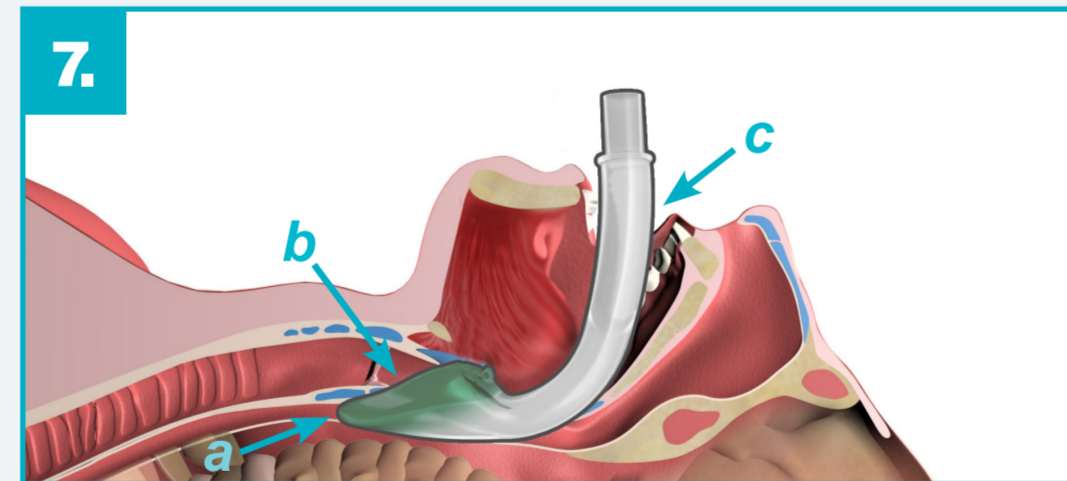

7. Faire glisser délicatement le dispositif en descendant en continu le long du palais dur, jusqu'à sentir une résistance définitive.

L'extrémité de l'i-gel® doit se trouver dans l'orifice supérieur de l'œsophage (a) et le bourrelet contre les structures laryngées (b). Les incisives doivent reposer sur le cale-dents intégré (c).

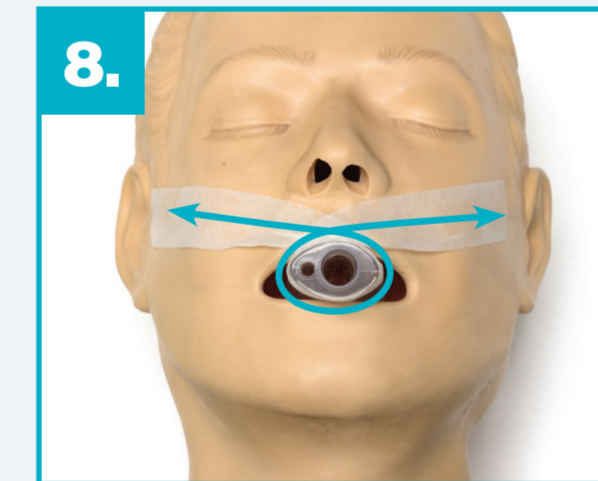

8. L'i-gel® doit être maintenu en place au moyen d'une bandelette adhésive, de 'maxillaire à maxillaire'.

Notes importantes sur la technique d'insertion recommandée

Le passage du bourrelet gel entre les piliers du voile (replis pharyngoépiglottiques) peut parfois donner la sensation d'une résistance et induire en erreur quant à l'insertion adéquate de l'i-gel®. Il est important de prolonger l'insertion du dispositif jusqu'à ce qu'une résistance définitive soit ressentie.

Une fois la butée finale atteinte, avec positionnement des incisives sur le cale-dents intégré, ne pas prolonger l'insertion ou forcer sur le dispositif.

Il est inutile d'introduire les doigts dans la bouche du patient lors du processus d'insertion du dispositif.

Visitez le site web www.i-gel.com