



Pièce en T avec réservoir pour Oxygène en phase de réveil




Oxygène & Aérosolthérapie ▪ Oxygénothérapie

Pièce en T avec réservoir pour Oxygène en phase de réveil

La pièce en T avec réservoir pour oxygène en phase de réveil d'Intersurgical a été conçue pour délivrer, en post-opératoire, avant l'extubation ou le retrait du dispositif supraglottique, de l'oxygène supplémentaire aux patients respirant spontanément, pendant le transfert et en salle de réveil. Grâce à une conception légère, la traction sur la sonde d'intubation ou le dispositif supraglottique est minimale. Le réservoir offre une indication visuelle et auditive de la respiration du patient.



% d'Oxygène délivré à différents débits*

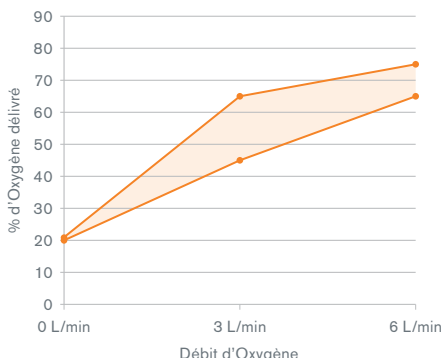

Usage unique, sans latex ni phtalates

*Dispositif pour administration d'oxygène à performance variable. La concentration d'oxygène délivrée dépend du modèle respiratoire du patient.

Référence: Rapport de test interne, Pièce en T avec réservoir pour Oxygène en phase de réveil.

Mouvements du réservoir

Offrant une indication visuelle de la respiration

Léger

Traction minimale sur le raccord patient

Matériau souple

Offrant une indication audible de la respiration

Le réservoir se remplit d'oxygène lors de l'expiration

Pour accroître la concentration délivrée d'oxygène

Faible réinhalation de CO₂

Embout 6mm

Conforme BS EN 13544-2, pour une connexion sécurisée du tuyau à oxygène

Raccord standard 15mm

Connexion sur toute sonde d'intubation ou dispositif supraglottique

REF	Description	Long. tuyau	Qté/bte
1041000	Pièce en T avec réservoir pour Oxygène en phase de réveil		100
1041001	Pièce en T avec réservoir pour Oxygène en phase de réveil et tuyau	2.1 m	40
1041002	Pièce en T avec réservoir pour Oxygène en phase de réveil et masque oxygène moyenne concentration adulte Intersurgical EcoLite™, et tuyau	2.1 m	55

IS10.32 FR • Issue 5 09.24



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 et MDSAP