



## Pièce en T avec réservoir pour Oxygène en phase de réveil




Oxygène & Aérosolthérapie ▪ Oxygénothérapie

## Pièce en T avec réservoir pour Oxygène en phase de réveil

La pièce en T avec réservoir pour oxygène en phase de réveil d'Intersurgical a été conçue pour délivrer, en post-opératoire, avant l'extubation ou le retrait du dispositif supraglottique, de l'oxygène supplémentaire aux patients respirant spontanément, pendant le transfert et en salle de réveil. Grâce à une conception légère, la traction sur la sonde d'intubation ou le dispositif supraglottique est minimale. Le réservoir offre une indication visuelle et auditive de la respiration du patient.



### % d'Oxygène délivré à différents débits\*

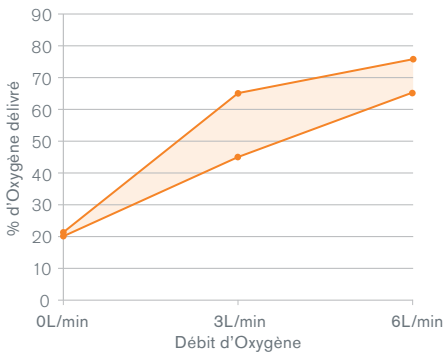

Usage unique, sans latex ni phtalates

\*Dispositif pour administration d'oxygène à performance variable. La concentration d'oxygène délivrée dépend du modèle respiratoire du patient.  
Référence: Rapport de test interne, Pièce en T avec réservoir pour Oxygène en phase de réveil.

- Léger**  
Traction minimale sur le raccord patient
- Mouvements du réservoir**  
Offrant une indication visuelle de la respiration
- Matériau souple**  
Offrant une indication audible de la respiration
- Le réservoir se remplit d'oxygène lors de l'expiration**  
Pour accroître la concentration délivrée d'oxygène
- Faible réinhalation de CO<sub>2</sub>**
- Embout 6mm**  
Conforme BS EN 13544-2, pour une connexion sécurisée du tuyau à oxygène
- Raccord standard 15mm**  
Connexion sur toute sonde d'intubation ou dispositif supraglottique

REF	Description	Long. tuyau	Qté/bte
1041000	Pièce en T avec réservoir pour Oxygène en phase de réveil		100
1041001	Pièce en T avec réservoir pour Oxygène en phase de réveil et tuyau	2.1m	40
1041002	Pièce en T avec réservoir pour Oxygène en phase de réveil et masque oxygène moyenne concentration adulte Intersurgical EcoLite™, et tuyau	2.1m	55

IS10.32 ▪ Issue 4 07.23



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2  
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié  
ISO 9001:2015, ISO 13485:2016,  
ISO 14001:2015 et MDSAP