



FiltaNeb™

Kit avec nébuliseur Cirrus™2, masque fermé adulte Intersurgical EcoLite™, filtre et tuyau



Oxygène & Aérosolthérapie ▪ Nébulisation

Pour répondre à l'évolution des besoins du marché mondial de la santé, cette solution de soins a été développée pour réduire l'émission de particules dans l'environnement pendant la nébulisation. Le kit FiltaNeb™ comprend un masque fermé basé sur le masque Intersurgical EcoLite™ pourvu d'un filtre au niveau de la voie expiratoire. La lèvre du masque est de couleur verte opaque pour différencier ce masque fermé de nos masques aérosols standards. Pour assurer la meilleure étanchéité possible, un élastique supplémentaire est fourni dans le kit.

Ce dispositif offre une réduction >95% des particules dans l'environnement, aidant ainsi à minimiser les émissions de gaz expiratoires potentiellement contaminés s'échappant pendant la nébulisation, réduisant de fait le risque encouru par les professionnels de santé.

Le nébuliseur Cirrus™2 offre de nombreuses caractéristiques, notamment une cuve graduée indiquant précisément la quantité de liquide dans le nébuliseur. La cuve dispose d'un système d'ouverture/fermeture en un quart de tour avec clic de verrouillage, permettant un remplissage rapide de la cuve et une meilleure étanchéité entre la cuve et le corps du nébuliseur.

Le nébuliseur Cirrus2 est conçu pour délivrer un aérosol médicamenteux à visée trachéobronchique.

Ourlet nasal incurvé


S'adapte à différentes formes de nez pour réduire le risque de fuite de médicament nébulisé au niveau des yeux

Filtre sur la voie expiratoire

Réduit l'émission de particules dans l'environnement lors de la thérapie

Cuve de nébulisation graduée

Préparation plus rapide

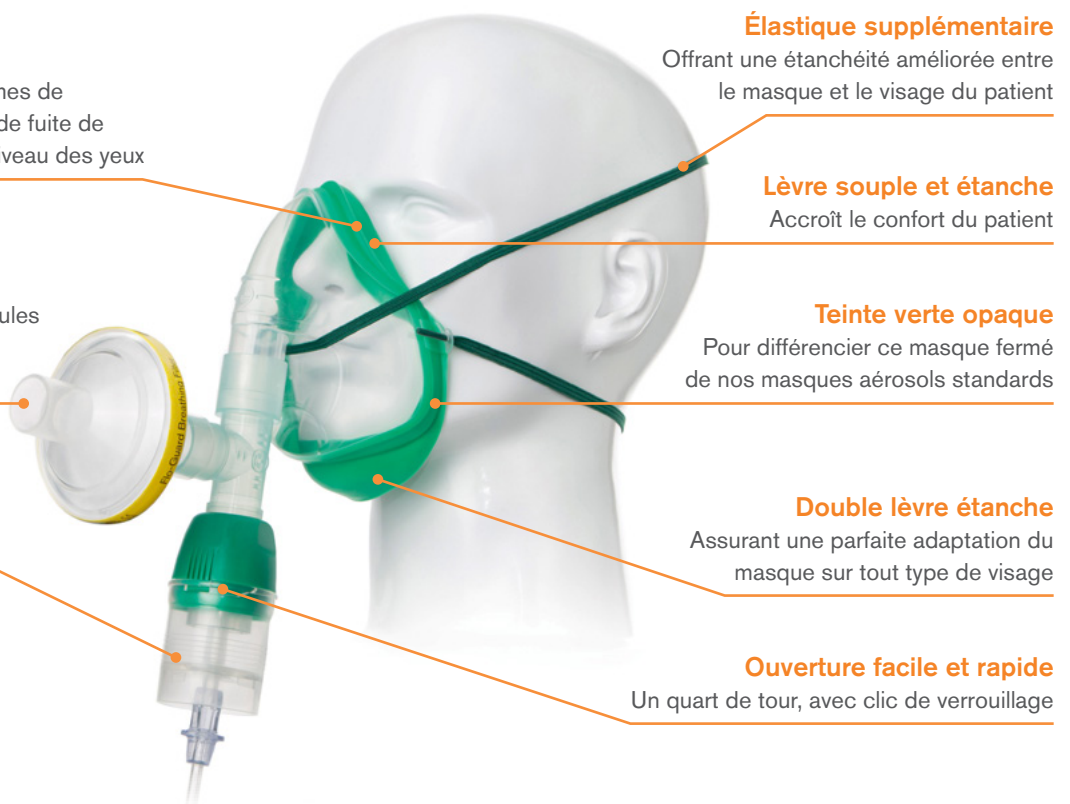

Élastique supplémentaire
Offrant une étanchéité améliorée entre le masque et le visage du patient

Lèvre souple et étanche
Accroît le confort du patient

Teinte verte opaque
Pour différencier ce masque fermé de nos masques aérosols standards

Double lèvre étanche
Assurant une parfaite adaptation du masque sur tout type de visage

Ouverture facile et rapide
Un quart de tour, avec clic de verrouillage

REF	Description	Long. tuyau	Qté/bte
1453044	FiltaNeb™, kit avec nébuliseur Cirrus™2, masque fermé adulte Intersurgical EcoLite™, filtre et tuyau	2.1 m	12

Produit à faible impact environnemental

IS10.39 FR • Issue 5 12.24



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 et MDSAP

UK ▪ Australia ▪ Benelux ▪ Brazil ▪ Canada ▪ China ▪ Colombia ▪ Czech Republic ▪ Denmark ▪ France ▪ Germany ▪ Ireland ▪ Italy ▪ Japan
Lithuania ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Norway ▪ Philippines ▪ Portugal ▪ Russia ▪ South Africa ▪ Spain ▪ Sweden ▪ Taiwan ▪ Turkey ▪ USA