



Intersurgical InterFlow™

Mélangeur de gaz respiratoires



Soins Intensifs ▪ InterFlow™ — Mélangeur de gaz respiratoires

Intersurgical InterFlow™

Nous avons le plaisir de vous présenter l'InterFlow, le nouveau mélangeur de gaz à thérapie multiple d'Intersurgical.

Compact et polyvalent, le mélangeur de gaz InterFlow prouve que la taille n'a pas d'importance.

De nos jours, les équipements respiratoires hospitaliers n'ont jamais été aussi avancés. Toutefois, ces évolutions se concentrent souvent autour de solutions complexes et onéreuses. Intersurgical a adapté le niveau de technologie d'un respirateur de Soins Intensifs pour l'appliquer à un mélangeur de gaz basique. Le résultat est l'InterFlow : un appareil simple, intuitif, mais technologiquement avancé, idéal pour les besoins d'aujourd'hui en soins intensifs.

Conçu pour une utilisation chez l'adulte, l'enfant et le nouveau-né, le mélangeur InterFlow s'adapte à de nombreuses situations et propose différentes caractéristiques conçues pour rendre les thérapies VS-PEP et OHD plus sûres pour le patient et plus aisées pour le clinicien.

Compact et léger

Intégration facile et flexible en cas d'espace restreint

Alarmes adaptatives

Des alarmes adaptatives et intelligentes surveillent le débit de sortie et la pression côté patient contre tout écart inattendu.

Monitoring de la SpO₂

Un capteur* de SpO₂ optionnel Masimo SET® peut être connecté à l'appareil pour surveiller en continu la saturation pulsée en oxygène du patient.

Compatible Philips® IntelliBridge™

Surveillance centralisée via les systèmes de monitoring patient Philips.

Interface utilisateur


Navigation intuitive dans l'affichage grâce à l'écran couleur 4.2" tactile intégré.

Alimentation adaptable

Directement compatible avec des sources de gaz en 2 ou 6 bars et disponible avec des raccords NIST ou DISS.

Capteurs intégrés

Le capteur interne de débit thermique de masse et le capteur d'oxygène paramagnétique assurent une délivrance précise de la thérapie et minimisent la perte d'O₂.

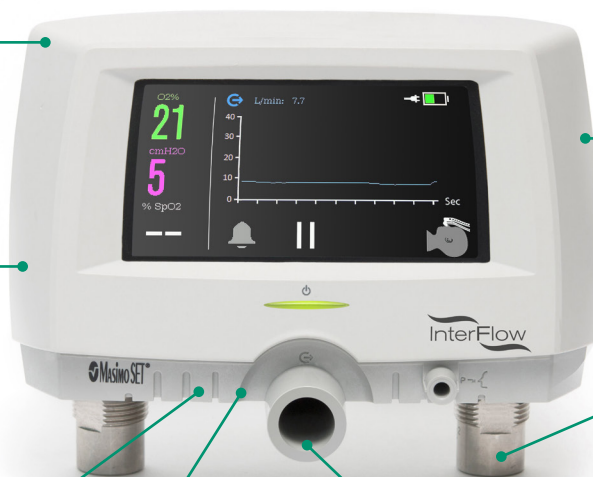


*InterFlow est fourni avec un câble patient adulte Masimo RD SET DCI®. Autres modèles de capteurs compatibles disponibles. Masimo et Masimo SET sont des marques déposées de Masimo Corporation. Philips est une marque déposée de Koninklijke Philips N.V. IntelliBridge est une marque commerciale de Koninklijke Philips N.V.




Modes de thérapie

Le mélangeur InterFlow™ est pourvu de 6 modes de thérapie pré-réglés. Chaque mode comprend des réglages de paramètre et d'alarme personnalisés conçus en fonction de la catégorie de patient et du type de thérapie.

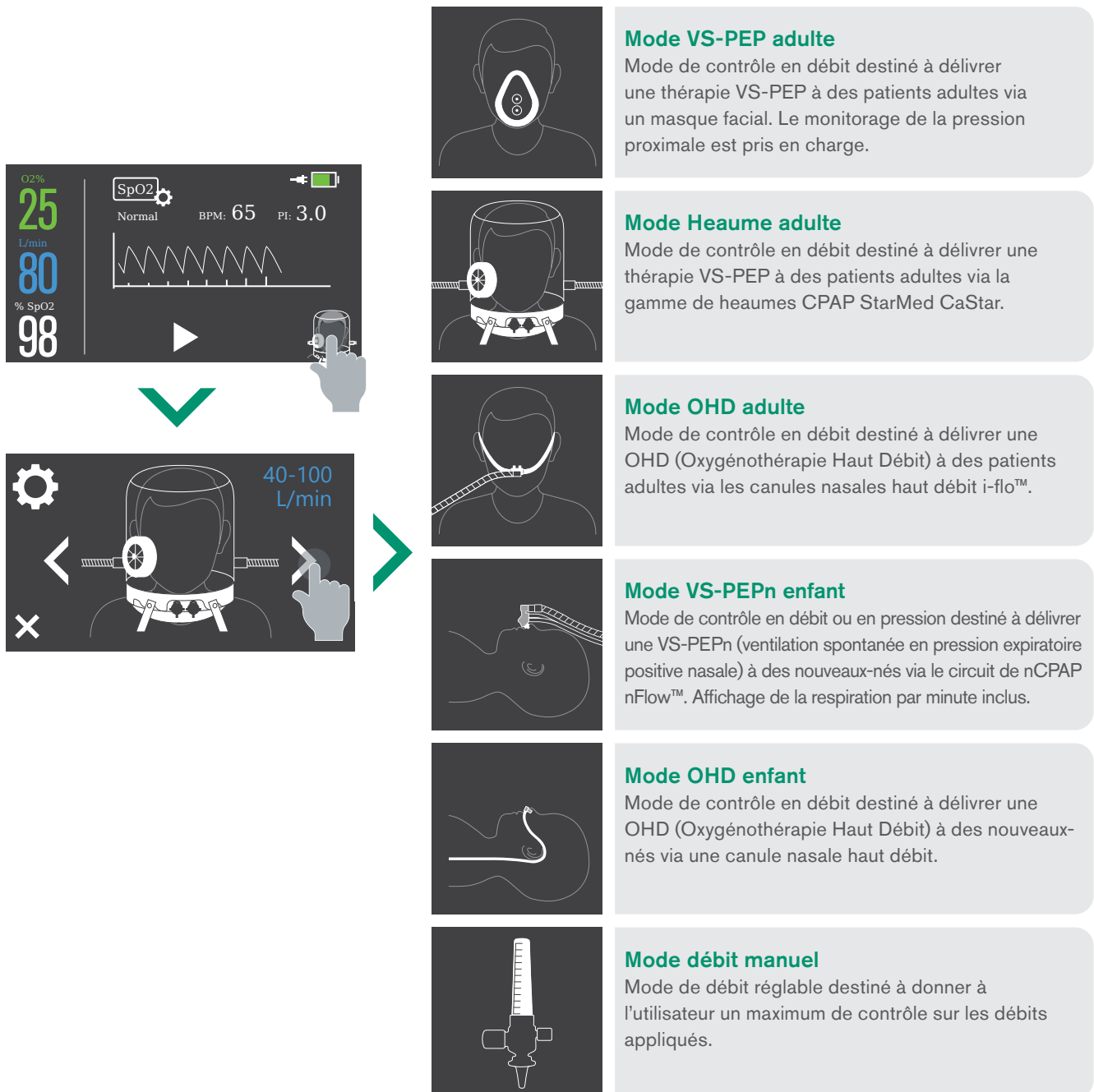


Ecran de surveillance

Les paramètres de la thérapie peuvent être affichés de manière numérique ou graphique via l'affichage personnalisable de la courbe en temps réel.

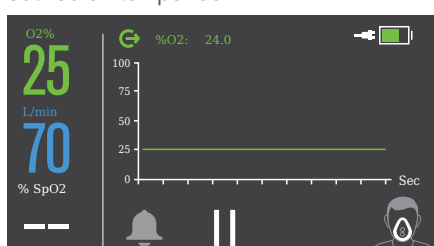

Affichage de la courbe

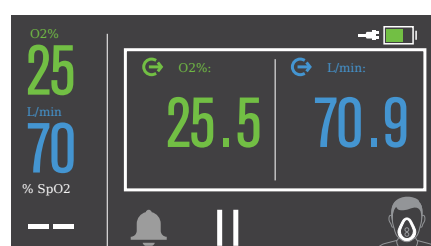

Affichage numérique

Le mélangeur de gaz InterFlow™ est disponible en option avec l'humidificateur respiratoire VHB20, des accessoires de fixation et un pied à roulettes. Pour plus d'informations ou pour demander une présentation, veuillez nous contacter sur info@intersurgical.fr.

REF	Description	Qté/bte
7210014	InterFlow mélangeur de gaz respiratoires — FR	1

Accessoires

REF	Description	Langues	Qté/bte
7600000	Pied mobile pour équipement		1
7600006	Kit pour bouteille de gaz		1
7602000	Pince pour rail médical		1
7601000	Collier de serrage		1
51008749	VHB20 humidificateur respiratoire (EU2)	Anglais, Français, Allemand, Néerlandais	1
51006181	VHB20 sonde de température et d'humidité	-	1



L'InterFlow est compatible avec l'ensemble de la gamme d'interfaces patient et de circuits respiratoires Intersurgical.

Plus d'informations disponibles sur www.intersurgical.fr/produits

Kit pour bouteille de gaz



Humidificateur respiratoire VHB20