



STARMed CaStar Ped

Heaume pédiatrique pour CPAP et ventilation mécanique non invasive (VNI)



Soins Intensifs ▪ Interfaces Patient ▪ **STARMed**



STARMed CaStar Ped heaume pédiatrique pour CPAP et VNI

StarMed CaStar Ped

Le CaStar Ped est une interface patient légère, confortable et polyvalente pour la pédiatrie, conçue pour offrir une alternative aux méthodes traditionnelles de délivrance d'une CPAP ou d'une VNI. Le CaStar Ped est bien toléré lors d'utilisations prolongées et peut réduire les risques associés à l'intubation endotrachéale ou au masque facial. Il peut être utilisé aussi bien en position assise qu'allongée pour offrir une solution idéale pour la thérapie CPAP et VNI.


Caractéristiques techniques

- Sans phtalates
- Raccords 22M - 22F conformes à la norme ISO (modèle CPAP)
- Raccords 22M conformes à la norme ISO (modèle VNI)

- Jauge de pression intégrée pour contrôler le niveau de pression à l'intérieur du heaume (modèle CPAP)
- Fixations axillaires confortables et atraumatiques
- Deux ports d'accès étanche polyvalents adaptés pour des sondes ou cathéters à simple ou multiple lumière
- Nouveau hublot hermétique d'accès au patient, pourvu d'une valve de sécurité bidirectionnelle à ouverture automatique en cas de sous-pression
- Une fois le heaume sous pression, l'étanchéité du système est assurée par une membrane élastique épousant la partie supérieure du torse

Bibliographie:

- Piastra M, et al. Noninvasive pressure-support ventilation in immunocompromised children with ARDS: a feasibility study, Intensive Care Med. 2009 Aug;35(8):1420-7
- Piastra M, et al. Treatment of acute respiratory failure by helmet-delivered non-invasive pressure support ventilation in children with acute leukemia: a pilot study, Intensive Care Med. 2004 Mar;30(3):472-6

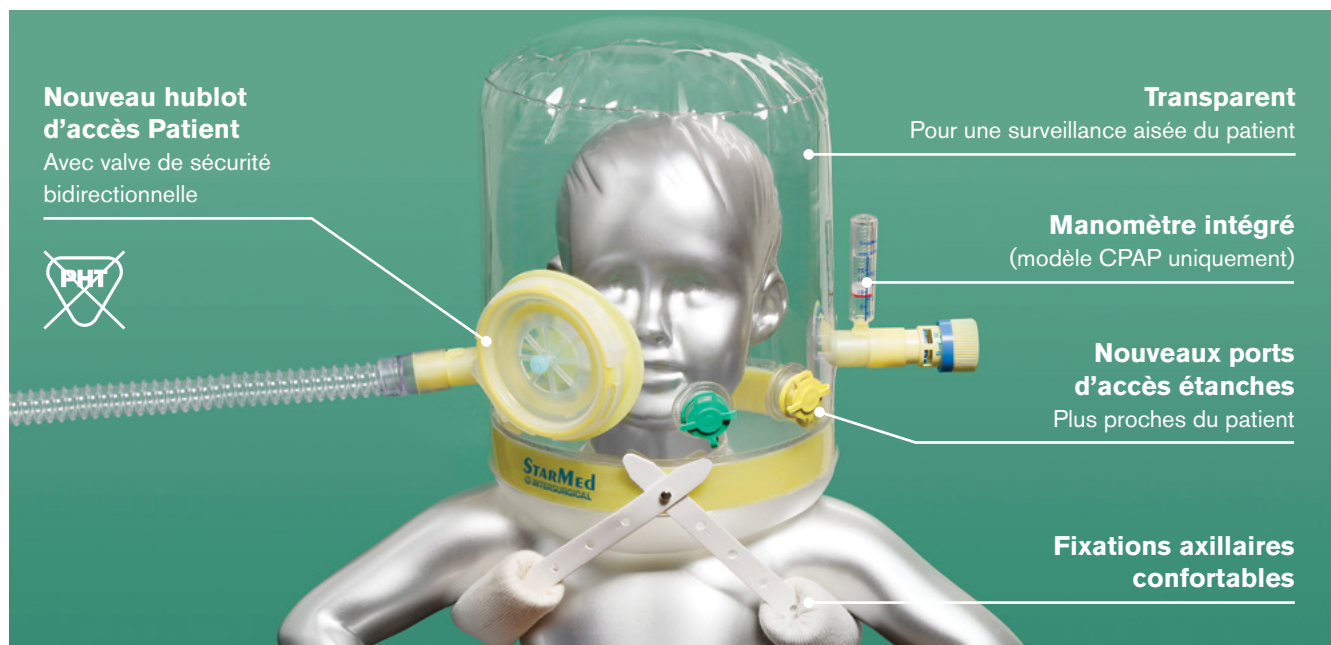

CaStar Ped heaume pédiatrique pour CPAP et VNI avec valve de sécurité bidirectionnelle et hublot d'accès patient*

Référence	Description	Poids du patient	Qté/bte
CP201PED/2R	CaStar R Ped pour VNI avec connexions 22M-22M	>15Kg	5
CP200PED/2	CaStar Ped pour CPAP avec connexions 22M-22F	>12Kg	5



www.intersurgical.fr/info/starmed

*Valve de PEEP et tuyau non inclus A commander séparément. Veuillez vous référer au site internet pour la gamme d'accessoires.



7 Bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne La Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Fabricant :
Intersurgical S.p.A.
Mirandola (MO) Italie

IS1.19_FR • Issue 8 06.20