



## Masque oxygène moyenne concentration adulte Intersurgical EcoLite™



Oxygène & Aérosolthérapie ▪ Oxygénothérapie

## Masque oxygène moyenne concentration adulte Intersurgical EcoLite™

### Bienvenue dans la Zone de Confort

La conception unique et les matériaux utilisés dans la fabrication du masque Intersurgical EcoLite™ offrent un confort accru du patient et un impact environnemental réduit.

### Confortable pour le Patient

L'amélioration du confort du patient est l'une des clés du développement du masque Intersurgical EcoLite™. Les dernières techniques de fabrication permettent de combiner deux matériaux sans PVC au sein d'un même dispositif. Le polypropylène constituant le corps du masque Intersurgical EcoLite™ est transparent, léger et suffisamment rigide pour maintenir la forme du masque, tandis que le second matériau en TPE, plus souple, constitue la lèvre étanche entrant en contact avec le visage du patient.

### Confortable pour l'Environnement

Le masque Intersurgical EcoLite™ est le pilier de la gamme Eco, véritable reflet de notre engagement dans le développement durable. De nombreux organismes remettent en question l'utilisation du PVC dans les produits médicaux et son impact sur l'environnement. L'utilisation de matériaux alternatifs a permis l'élimination du PVC dans le masque Intersurgical EcoLite™, réduisant de fait l'impact environnemental.

### Intersurgical EcoLite

### Gamme Eco

#### Ourlet nasal incurvé

S'adapte à différentes formes de nez pour réduire le risque de fuite d'oxygène au niveau des yeux

#### Sans pince-nez métallique


Compatible IRM

#### Évents expiratoires

Conçus pour minimiser la réinhalation du dioxyde de carbone

#### Système de double lèvre étanche

Assurant une meilleure adaptation sur toute forme de visage

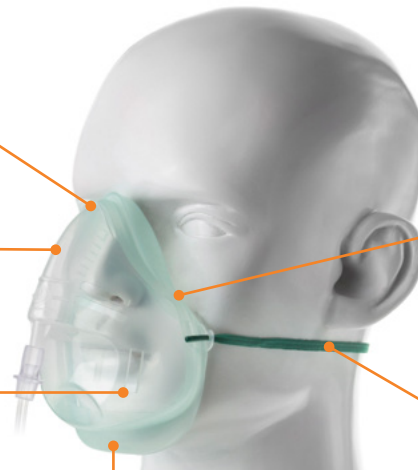

#### Léger

Masque fabriqué à l'aide de matériaux légers

#### Lèvre souple étanche


Accroît le confort du patient

#### L'élastique peut se positionner sur ou sous les oreilles

La position sous les oreilles aide à prévenir l'irritation et la formation d'ulcération



Disponible avec un tuyau à oxygène pourvu d'un raccord universel, pouvant être connecté à un débitmètre muni d'un embout 6mm ou d'un raccord fileté 9/16-18 UNF Diameter Index Safety System (D.I.S.S.)

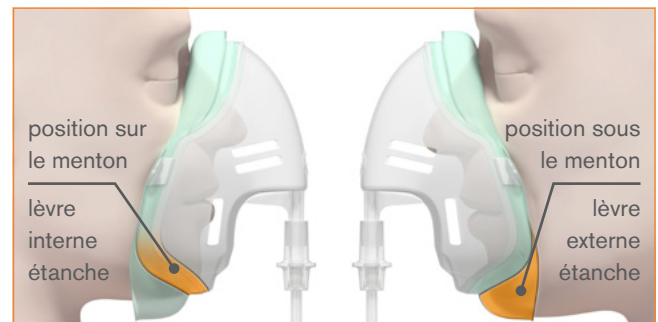

REF	Description	Long. tuyau	Qté/bte
1136015	Intersurgical EcoLite™, masque oxygène moyenne concentration adulte		55
1135015	Intersurgical EcoLite™, masque oxygène moyenne concentration adulte avec tuyau	2.1m	40
1135017	Intersurgical EcoLite™, masque oxygène moyenne concentration adulte avec tuyau à raccord universel	2.1m	30

Produit à faible impact environnemental

IS10.16 FR • Issue 16 09.24



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2  
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié  
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,  
ISO 13485:2016 et MDSAP