



Masque oxygène moyenne concentration adulte Intersurgical EcoLite™



Oxygène & Aérosolthérapie ▪ Oxygénothérapie

Masque oxygène moyenne concentration adulte Intersurgical EcoLite™

Bienvenue dans la Zone de Confort

La conception unique et les matériaux utilisés dans la fabrication du masque Intersurgical EcoLite™ offrent un confort accru du patient et un impact environnemental réduit.

Confortable pour le Patient

L'amélioration du confort du patient est l'une des clés du développement du masque Intersurgical EcoLite™. Les dernières techniques de fabrication permettent de combiner deux matériaux sans PVC, donc sans phtalates, au sein d'un même dispositif. Le polypropylène constituant le corps du masque Intersurgical EcoLite™ est transparent, léger et suffisamment rigide pour maintenir la forme du masque, tandis que le second matériau en TPE, plus souple, constitue la lèvre étanche entrant en contact avec le visage du patient.

Confortable pour l'Environnement

Le masque Intersurgical EcoLite™ est le pilier de la gamme Eco, véritable reflet de notre engagement dans le développement durable. De nombreux organismes remettent en question l'utilisation du PVC dans les produits médicaux et son impact sur l'environnement. L'utilisation de matériaux alternatifs a permis l'élimination du PVC dans le masque Intersurgical EcoLite™, réduisant de fait l'impact environnemental.

Ourlet nasal incurvé

S'adapte à différentes formes de nez pour réduire le risque de fuite d'oxygène au niveau des yeux

Sans pince-nez métallique


Compatible IRM

Évents expiratoires

Conçus pour minimiser la réinhalation du dioxyde de carbone

Système de double lèvre étanche

Assurant une meilleure adaptation sur toute forme de visage

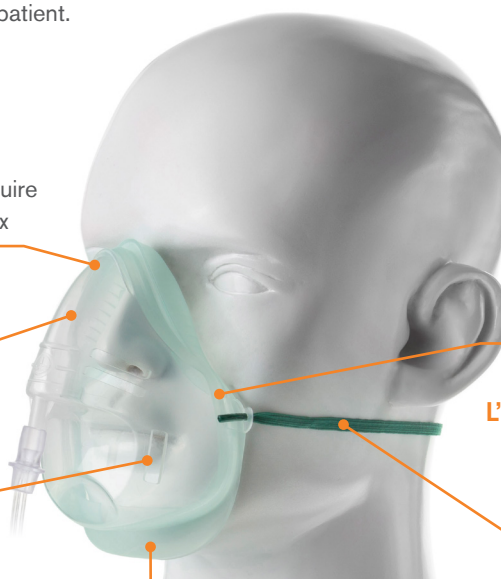

Léger

Masque fabriqué à l'aide de matériaux légers

Lèvre souple étanche

Accroît le confort du patient

L'élastique peut se positionner sur ou sous les oreilles

La position sous les oreilles aide à prévenir l'irritation et la formation d'ulcération



Disponible avec un tuyau à oxygène pourvu d'un raccord universel, pouvant être connecté à un débitmètre muni d'un embout 6mm ou d'un raccord fileté 9/16-18 UNF Diameter Index Safety System (D.I.S.S.)



Masques adultes

REF	Description	Long. tuyau	Qté/bte
1136015	Intersurgical EcoLite™, masque oxygène moyenne concentration adulte		55
1135015	Intersurgical EcoLite™, masque oxygène moyenne concentration adulte avec tuyau	2.1m	40
1135017	Intersurgical EcoLite™, masque oxygène moyenne concentration adulte avec tuyau à raccord universel	2.1m	30

Produit à faible impact environnemental

IS10.16 FR • Issue 15 03.24



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 9001:2015, ISO 13485:2016,
ISO 14001:2015 et MDSAP