




STARMed CaStar R Up

Heaume pour ventilation mécanique non invasive avec ouverture facile

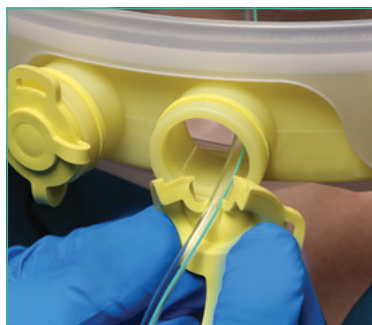

Soins Intensifs ▪ Interfaces Patient ▪ **STARMed**



STARMed CaStar R Up heaume VNI à ouverture facile

StarMed CaStar R Up

Le CaStar R Up à ouverture facile est une interface patient confortable, légère et polyvalente pour ventilation mécanique non invasive (VNI), conçue pour offrir une alternative aux méthodes traditionnelles. Le CaStar R Up est bien toléré lors d'utilisations prolongées et peut réduire les risques associés à l'intubation endotrachéale ou au masque facial. Il peut être utilisé aussi bien en position assise qu'allongée pour offrir une solution idéale en VNI.

Avantages

- Permet un accès rapide au visage du patient lors de soins ou en cas d'urgence
- Un seul opérateur peut aisément retirer la partie supérieure du heaume pour avoir un accès complet au patient
- Les sondes et cathéters, connectées à la partie inférieure du heaume, peuvent rester en place sur le patient

Caractéristiques techniques

- Sans phtalates
- Raccords 22M conformes à la norme ISO
- Coussin cervical gonflable pour accroître le confort du patient
- Fixations axillaires confortables et atraumatiques
- Autres accessoires de fixation disponibles si nécessaire
- Deux ports d'accès étanche polyvalents adaptés pour des sondes ou cathéters à simple ou multiple lumière
- Nouveau hublot hermétique d'accès au patient, pourvu d'une valve de sécurité bidirectionnelle à ouverture automatique en cas de sous-pression
- Une fois le heaume sous pression, l'étanchéité du système est assurée par une membrane élastique épousant la partie supérieure du torse

Parcourir la littérature sur www.intersurgical.fr



CaStar R Up heaume VNI à ouverture facile avec coussin cervical gonflable et hublot d'accès patient avec valve de sécurité bidirectionnelle*

| Référence | Taille | Tour de cou | Qté/bte |
|-------------|-------------------|-------------|---------|
| CA022XXL/2R | Extra Extra Grand | ≥50cm | 5 |
| CA022XL/2R | Extra Grand | 45-52cm | 5 |
| CA022L/2R | Grand | 40-47cm | 5 |
| CA022M/2R | Moyen | 34-41cm | 5 |
| CA022S/2R | Petit | 27-34cm | 5 |
| CA022XS/2R | Extra Petit | 17-27cm | 5 |



www.intersurgical.fr/info/starmed

*Tuyaux non inclus. A commander séparément. Veuillez vous référer au site internet pour la gamme d'accessoires.



7 Bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne La Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Fabricant :
Intersurgical S.p.A.
Mirandola (MO) Italie

IS1.39_FR • Issue 5 06.20