




STARMed CaStar Up

Heaume CPAP avec ouverture facile

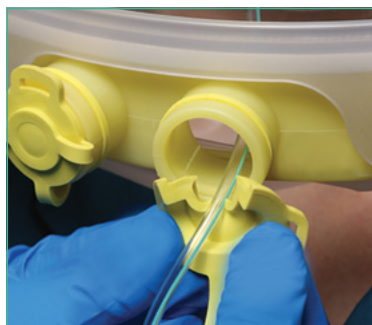

Soins Intensifs ▪ Interfaces Patient ▪ **STARMed**



STARMed CaStar Up heaume CPAP à ouverture facile

StarMed CaStar Up

Le CaStar Up à ouverture facile est une interface patient confortable, légère et polyvalente pour CPAP, conçue pour offrir une alternative aux méthodes traditionnelles. Le CaStar Up est bien toléré lors d'utilisations prolongées et peut réduire les risques associés à l'intubation endotrachéale ou au masque facial. Il peut être utilisé aussi bien en position assise qu'allongée pour offrir une solution idéale en thérapie CPAP.


Avantages

- Permet un accès rapide au visage du patient lors de soins ou en cas d'urgence
- Un seul opérateur peut aisément retirer la partie supérieure du heaume pour avoir un accès complet au patient
- Les sondes et cathéters, connectées à la partie inférieure du heaume, peuvent rester en place sur le patient

Caractéristiques techniques

- Sans phtalates
- Raccords 22M-22F conformes à la norme ISO
- Équipé d'une jauge de pression intégrée pour contrôler le niveau de pression à l'intérieur du masque
- Coussin cervical gonflable pour accroître le confort du patient
- Fixations axillaires confortables et atraumatiques
- Autres accessoires de fixation disponibles si nécessaire
- Deux ports d'accès étanche polyvalents adaptés pour des sondes ou cathéters à simple ou multiple lumière
- Nouveau hublot hermétique d'accès au patient, pourvu d'une valve de sécurité bidirectionnelle à ouverture automatique en cas de sous-pression
- Une fois le heaume sous pression, l'étanchéité du système est assurée par une membrane élastique épousant la partie supérieure du torse

Parcourir la littérature sur www.intersurgical.fr

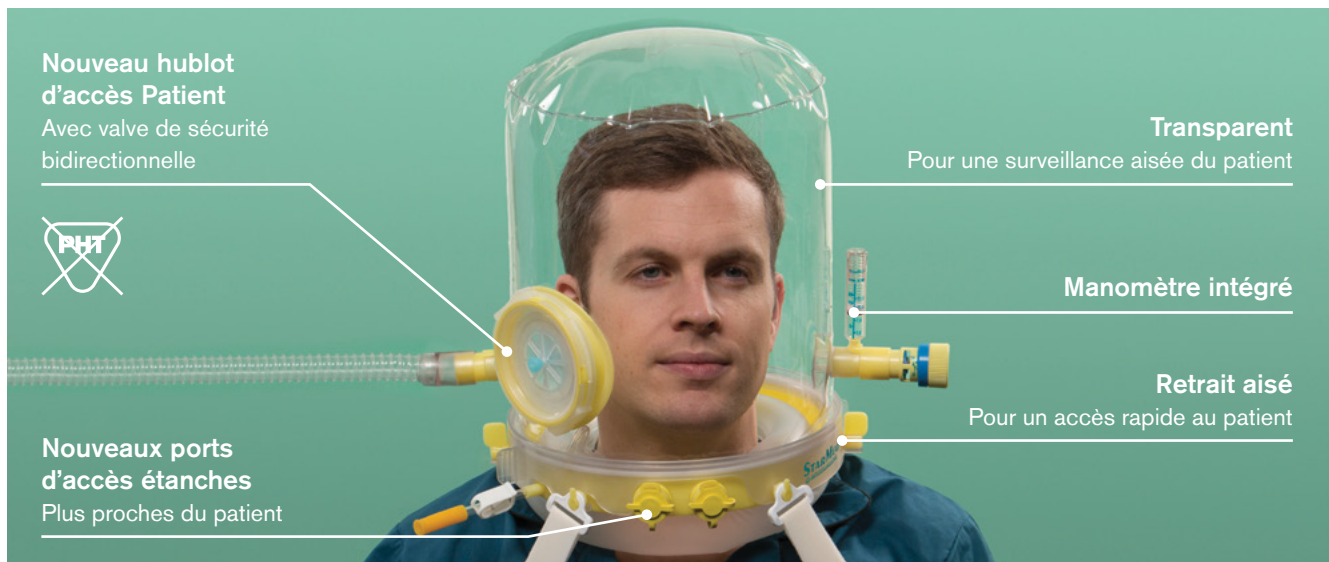

CaStar Up heaume CPAP à ouverture facile avec coussin cervical gonflable et hublot d'accès patient avec valve de sécurité bidirectionnelle*

Référence	Taille	Tour de cou	Qté/bte
CA012XXL/2	Extra Extra Grand	≥50cm	5
CA012XL/2	Extra Grand	45-52cm	5
CA012L/2	Grand	40-47cm	5
CA012M/2	Moyen	34-41cm	5
CA012S/2	Petit	27-34cm	5
CA012XS/2	Extra Petit	17-27cm	5



www.intersurgical.fr/info/starmed

▶ Vidéo disponible sur www.intersurgical.fr

*Valve de PEEP et tuyau non inclus. A commander séparément. Veuillez vous référer au site internet pour la gamme d'accessoires.



7 Bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne La Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Fabricant :
Intersurgical S.p.A.
Mirandola (MO) Italie

IS1.31_FR • Issue 7 06.20